

Escáner intraoral MEDIT



EI MEDIT

escáner intraoral

De un vistazo

Presupuesto



		MEDIT i600	MEDIT i700	MEDIT i700 inalámbrico	MEDIT i900/ i900 clásico	MEDIT i900 Movilidad
Exploración	Marco de escaneo	Hasta 35 FPS	Hasta 70 FPS	Hasta 70 FPS	Hasta 70 FPS	Hasta 70 FPS
	Tecnología de imágenes	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura de transmisión en 3D a todo color
	Fuente de LED	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO	CONDUJO
	Antipañamiento Tecnología	Antivaho adaptativo	Antivaho adaptativo	Antivaho adaptativo	Antivaho adaptativo	Antivaho adaptativo
Pieza de mano	Dimensiones	248 x 44 x 47,4 mm	248 x 44 x 47,4 mm	313 x 44 x 47,4 mm	223 x 37 x 35 mm	209 x 42 x 42 mm (sin punta ni batería)
	Peso total	245 gramos	245 gramos	328 gramos	165 gramos	242 g (sin punta ni batería)
Consejo	Tamaño de la punta	22,2 x 15,9 mm	22,2 x 15,9 mm	22,2 x 17,1 mm	Tamaño 18,36 x 13,1 mm M 22,4 x 16,3 mm Largo 26,9 x 19,7 mm	Tamaño 18,36 x 13,1 mm M 22,4 x 16,3 mm Largo 26,9 x 19,7 mm
	Ángulo del espejo	—	ángulo de 45 grados Escaneo más fácil del área molar distal	—	ángulo de 45 grados Escaneo más fácil del área molar distal	ángulo de 45 grados Escaneo más fácil del área molar distal
	Área de escaneo	15 x 13 milímetros	15 x 13 milímetros	15 x 13 milímetros	Tamaño 10 x 8 mm M 14 x 11,5 mm Largo 18 x 15 mm	Tamaño 10 x 8 mm M 14 x 11,5 mm Largo 18 x 15 mm
	Esterilizable en autoclave	Hasta 100 x - autoclavable a 121°C 30 minutos. - autoclavable a 134°C 4 min. (Tipo pre-vacío) - autoclavable a 135°C 10 min. (Tipo Gravedad)	Hasta 100 x - autoclavable a 121°C 30 minutos. - autoclavable a 134°C 4 minutos. - autoclavable a 135°C 10 minutos.	Hasta 150 x - autoclavable a 121°C 30 min. (Tipo Gravedad) - autoclavable a 134°C 4 min. (Tipo pre-vacío) - autoclavable a 135°C 10 min. (Tipo Gravedad)	Hasta 150 x - autoclavable a 121°C 30 min. (Tipo Gravedad) - autoclavable a 134°C 4 min. (Tipo pre-vacío) - autoclavable a 135°C 10 min. (Tipo Gravedad)	Hasta 150 x - autoclavable a 121°C 30 min. (Tipo Gravedad) - autoclavable a 134°C 4 min. (Tipo pre-vacío) - autoclavable a 135°C 10 min. (Tipo Gravedad)
	Punta reversible	Sí	Sí	Sí	No	No
Especial Modo	Modo de control remoto	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Desinfección UV-C	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Conec- actividad	Cable/inalámbrico	Cable de 2,0 m (2,5 m bajo pedido) / Pieza de mano desmontable	Cable de 2,0 m (2,5 m bajo pedido) / Pieza de mano desmontable	Inalámbrico	Cable de 2,0 m (2,5 m bajo pedido) / Pieza de mano desmontable	Inalámbrico/Wi-Fi
	Conectividad	USB 3.1 Gen1	USB 3.1 Gen1 (suministro de energía C)	USB 3.1 Gen1 (Concentrador inalámbrico)	USB C	Conexión Wi-Fi

MEDIT i900




TEXT

MEDIT i900 clásico

Todo en la innovación

El Medit i900/ i900 classic cuenta con tecnología de vanguardia para un escaneo más suave, un manejo más sencillo y una precisión de escaneo mejorada.

Una forma más inteligente y sencilla de trabajar.

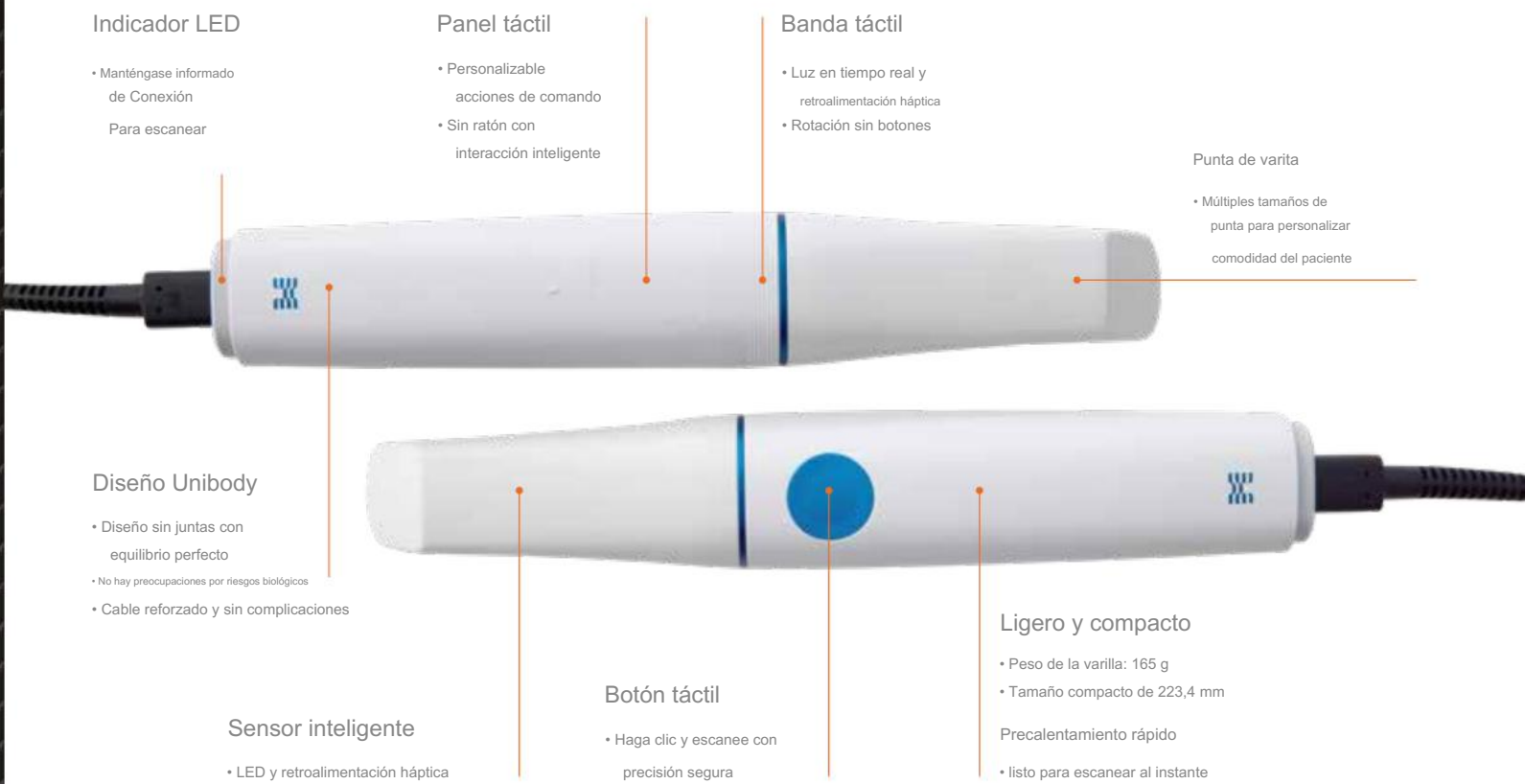

Nuevo motor óptico de tercera generación

Tecnología avanzada de cámara de 10 bits

- Escaneo de metales mejorado
- Precisión de escaneo mejorada
- Profundidad de escaneo más profunda
- Mejor textura



Proporciona cuerpos de escaneo precisos con facilidad Proporciona una preparación precisa de incrustaciones

Campo de visión más amplio 18 x 15 mm

(552 x 460 píxeles)

Obtenga escaneos precisos más rápido con menos capturas de imágenes



MEDIT i900

Producto comparativo



MEDIT i900

Movilidad

TEXT

Más allá de lo inalámbrico: verdadera movilidad

Presentamos el Medit i900M: el primer escáner intraoral compatible con iPad del mundo. Experimente la libertad de escanear en cualquier momento y en cualquier lugar, sin concesiones.



Hardware más inteligente. Mayores posibilidades.

Dos formas de conectarse, una experiencia perfecta.

¿Hub o Wi-Fi? El

i900M se adapta a tu flujo de trabajo.

- Elija concentrador tradicional o conexión Wi-Fi directa
- iPad solo admite conexión directa
- Configuración flexible en todos los dispositivos y clínicas



Rápido, inalámbrico y sin preocupaciones

Admite el último estándar Wi-Fi 6E.

Encuentra automáticamente la conexión Wi-Fi más rápida disponible cerca de ti.

	Wi-Fi 5	Wi-Fi 6	Wi-Fi 6E
Bandas de frecuencia	5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz + NUEVO 6GHz
Máximo Velocidad	hasta 3,5 Gbps	hasta 9,6 Gbps	hasta 9,6 Gbps con más ancho de banda y menos interferencia

MEDIT i700

Escaneo reinventado

Libere el potencial de su clínica.



Medit Conectar y escanear

A diferencia de la mayoría de los escáneres del mercado, el Medit i700 se puede [conectar directamente al PC mediante el cable de alimentación](#). No necesita un concentrador de alimentación ni cables adicionales. Esta nueva función del Medit i700 mejora la movilidad y el mantenimiento.



TEXT

Requisito mínimo del sistema: USB tipo C / USB Power Delivery 5 V, 3 A Soporte para Power Delivery



MEDIT i700 inalámbrico

Más allá de la tecnología probada del i700

Sigue siendo el mismo i700, súper rápido, ligero y preciso. Pero ahora inalámbrico.



No más cables

Sin cables, la exploración es cómoda desde cualquier ángulo. Escanea áreas proximales sin esfuerzo. Sin restricciones de movimiento.



Supercargado pero ligero

Excelente equilibrio de peso incluso con una batería conectada para mayor comodidad.



Rápido, preciso, conectado

Velocidad de escaneo de hasta 70 FPS*. Disfrute de la alta velocidad del i700 de forma inalámbrica y sin interrupciones.



Un hardware potente se une a Software versátil

Optimizado para mayor comodidad. No solo en hardware, sino también en software. El i700 inalámbrico incorpora la última tecnología MEDIT.

1 hora de escaneo continuo, hasta 8 horas en modo de espera

MEDIT i700 wireless

1 hora VS

Escáner A

45 minutos

Escáner B

30 minutos

*El tiempo de duración de la batería puede variar según el entorno del usuario (temperatura, intensidad de la señal, etc.) y el estado de la batería.

Escaneo continuo con una sola batería. Escanea todo el día sin preocuparte por la carga.




Maxilar + Mandibular + Oclusión

Tiempo total de escaneo de 2 minutos*



Escanee hasta 30 casos con 1 batería

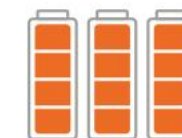

Hasta 90 casos utilizando las 3 baterías incluidas



Conexión de alimentación por cable:

Una vez que haya utilizado las 3 baterías incluidas, simplemente conecte el cable de alimentación y continúe usando el dispositivo.




La función de gestión inteligente de energía activa automáticamente el modo de suspensión cuando no se usa, con una duración de hasta 8 horas. El dispositivo se activa en segundos para escanear.

*El rendimiento puede variar según las condiciones de uso.

MEDIT i600

Odontología digital a tu alcance

El cerebro del i700 con un toque de color.

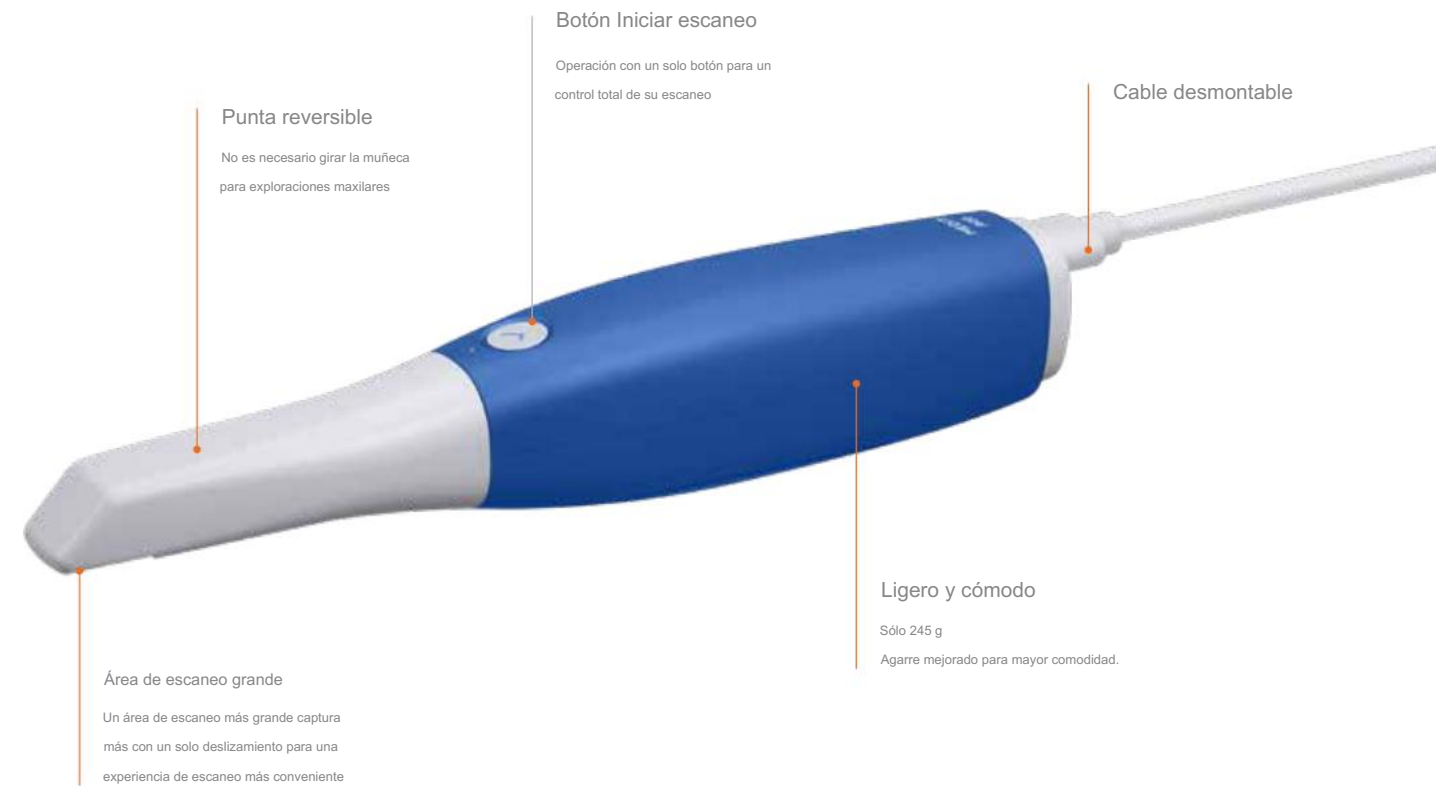

ES SUPER



Luz

Peso pluma de 245 g con agarre mejorado para mayor comodidad



Liso

La velocidad mejorada y las imágenes escaneadas óptimas brindan una experiencia de escaneo más fluida.

Suave como la seda, independientemente de las especificaciones de la PC.



Preciso

El flujo de trabajo digital comienza con datos precisos.

Medit i600 adquiere datos con precisión para una odontología digital sin esfuerzo. Precisión de arcada completa: $10,9 \mu\text{m} \pm 0,98$



Vívido

Transmite datos escaneados vívidos a través del nuevo sistema óptico ya utilizado en el Medit i700.



Fácil

Desde un manejo sencillo con un solo botón hasta programas que facilitan el escaneo. El i600 es todo lo que facilita la odontología digital.

Experimente una increíble odontología digital con Medit Scan para clínicas.

Nuestra tecnología de software de última generación hace que escanear sea más cómodo para usted.

Para obtener ayuda con el escaneo

Guía de escaneo inteligente




La guía de usuario mejorada proporciona ayuda ante anomalías detectadas durante el escaneo.

Filtrado de escaneo inteligente




El rendimiento mejorado del filtrado de IA facilita el proceso de escaneo al filtrar tejidos blandos como labios, mejillas y lengua.

Filtrado de color inteligente

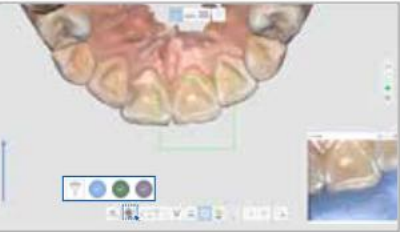

Filtra automáticamente los colores registrados, por ejemplo, el color de los guantes médicos, durante el escaneo.

Escaneo de impresiones

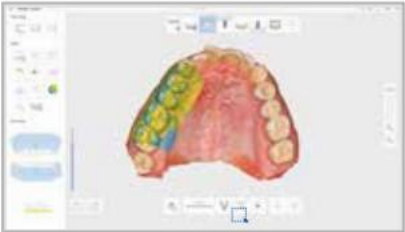

Obtenga los datos de los que son difíciles de escanear áreas utilizando una impresión, escanearla y combinar con los datos intraorales.

Para obtener datos de escaneo más precisos y exactos

Guía de tonos inteligentes



Identifica y sugiere automáticamente el tono más adecuado a partir de datos escaneados.

Coincidencia corporal con escaneo de IA




Garantiza datos precisos del cuerpo escaneado en áreas difíciles de escanear, como el región posterior.

Creación de línea de margen



Elija entre permitir que el sistema genere automáticamente la línea de margen para cualquier diente o crearla manualmente.

Modo HD

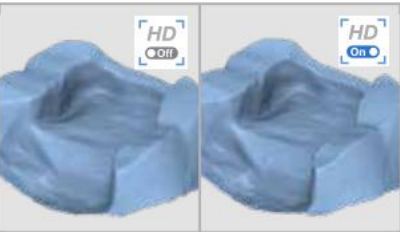

Obtenga una imagen de escaneo más nítida en el área del margen con el disco duro mejorado Modo.


Escanear y comunicar

Servicio basado en la nube



Almacena todos los datos en la nube. Trabaja en sus escaneos originales, archive sus impresiones y pedidos digitales, gestione sus casos dondequiera que esté.

Visor web y Case Talk

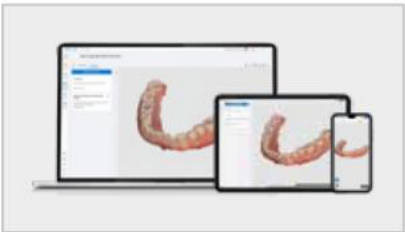

Experimente una comunicación más fluida con sus socios. Vea los datos escaneados en cualquier momento. dispositivo y compartir notas. Todos los datos son almacenados de forma segura.

Aplicaciones de Medit



Diseño de sonrisa



Orto Simulación



Oclusión Analizador



Ajuste de la corona



Diseño



Constructor de modelos



Temporales



Convertidor DCM



Calibración Mago